

HZ-3361A-5H

Keid Warm

Luxury Spa Bed with Heating / Camilla eléctrica para spa con calefacción / Table de spa électrique avec chauffage / Spa-Liege mit Heizung / Lettino Luxury Spa con riscaldamento



EN	2
ES	5
FR	8
IT	11
DE	14

DDUUEETT EUROPE would like to thank you for choosing Sonia products. We hope that this instruction manual will help you get the most out of this product.

If you have any doubts regarding its use and/or operation, please contact your distributor.

BEFORE USE

- Please read the entire instruction manual carefully before using the product. Take note of any warnings included in this manual.
- Always keep this instruction manual handy and if you give the device to another person, hand over the manual as it is an essential part of the product.
- Some components of the product may differ from the image that appears in catalogues, websites, brochures, etc.
- In order to enhance the product, the manufacturer reserves the right to modify its features and/or components without prior notice.

CORRECT USE OF THE DEVICE

- This product has been designed to be used by beauty professionals at beauty salons and should not be used for other purposes.
- Please note that any misuse of the device entails the loss of the guarantee.
- Do not make any modification to the device without the authorisation of DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL shall not be held liable for any material or personal damage due to the misuse of the product.

PRECAUTIONS

- Before using it for the first time and after each use, check the device and the mains cable for any damage.
- Unplug the device from the mains before starting to clean it or undertaking any type of maintenance.
- Do not use the product outdoors or in places where it may be affected by humidity or inclement weather.
- If the power supply cable is defective, unplug the appliance immediately and inform your dealer or specialised technician.
- Position the power supply cable properly so that people cannot trip over it and make sure you plug it into an earthed socket.
- At the end of the working day, disconnect the device and unplug the power supply cable from the mains.
- If you detect any anomaly in the operation of the product, please contact your distributor or specialised technician.

SAFETY INDICATIONS

- The device and accessories should be kept out of the reach of children.
- Only plug the device into a properly installed socket. The local mains voltage must correspond to the technical specifications of the device.
- The power socket must be accessible in case you have to quickly unplug the device at any given time.
- Always pull out the actual plug and not the mains cable.
- Never tamper with any electrical component or open up/repair any component of the device.
- Only your distributor or specialised technician should repair the device.
- Do not switch on the device if there is visible damage to it or to the mains cable.
- Never touch the device or the mains cable with wet hands.
- Never expose your hands or any part of your body to any hole or vacuum on the bed while it is in operation.


CONTENTS

- Electric Spa Bed x 1 unit
- Instruction manual x 1 unit

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	208x87x72-91 cm
Net weight	147 kg
Max. Load	200 kg
Motors	4
Upholstery	PU
Foam thickness	18 cm
Voltage	220-240 V
Input frequency	50/60 Hz
Includes	-Hand controller -Heating -3 memorised and customisable positions

SKETCH AND DIMENSIONS

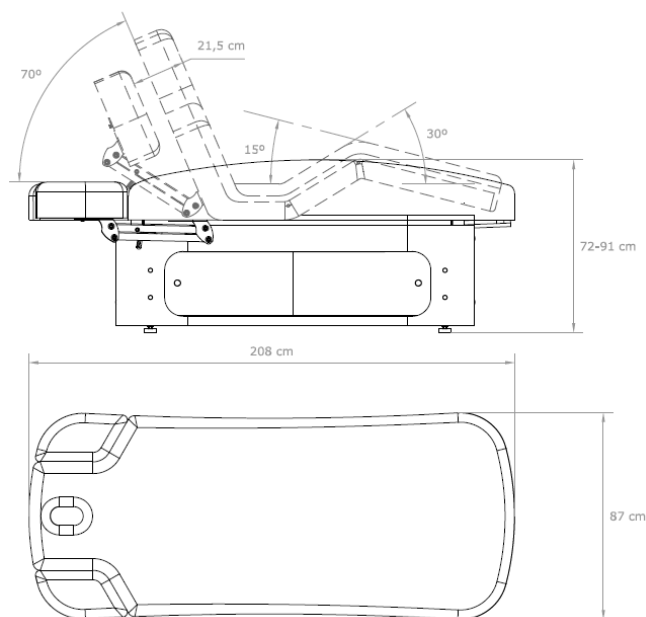


OPERATION

- Connect the bed to an electrical outlet using the power cord.
- To start up, the ON / OFF switch is found on the rear under the backrest. Press it down to the "I" (ON) position.
- This panel also features the fuse and three electrical sockets for the connection of accessories or work tools.



• Hand controller

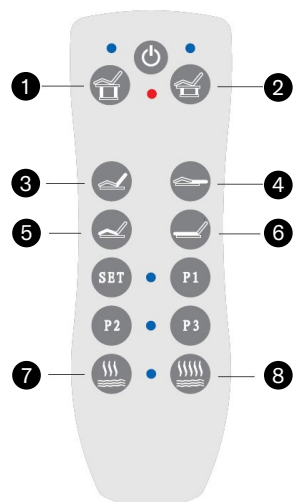


- Press the button to activate the control knob. The red indicator will light up and all its functions can be used.
- Press the button again and the red indicator will

turn off at the same time as the bed remains flat and in the lowest position possible.


- Press the buttons P1, P2, P3 to place the bed in one of the 3 factory-stored positions.
- Press the button **7** and the heating will start at normal level. The indicator will light up green. Press the button **7** again and the heating will stop. The green indicator will turn off.
- Press the button **8** and the heating will start at high level. The indicator will light up red. Press the button **8** again and the heating will stop. The red indicator will turn off.
- Set any of the 3 factory-stored positions to a new position:
 - Once the bed is in the desired position, press the SET button until the blue indicator lights up.
 - While the blue indicator is lit, press one of the three buttons (P1, P2, P3) for where you want to memorise the new position.
 - The new position will be memorised in the selected button.

• Adjusting height

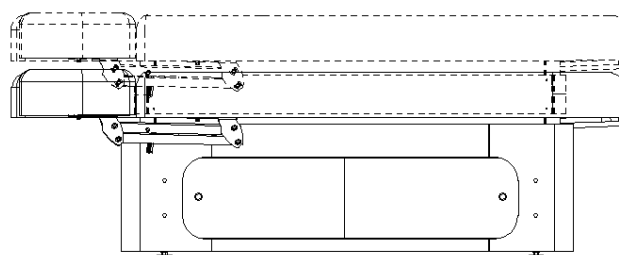


- Use the buttons **1** and **2** on the control knob to adjust the height of the bed.

• Adjusting backrest tilt

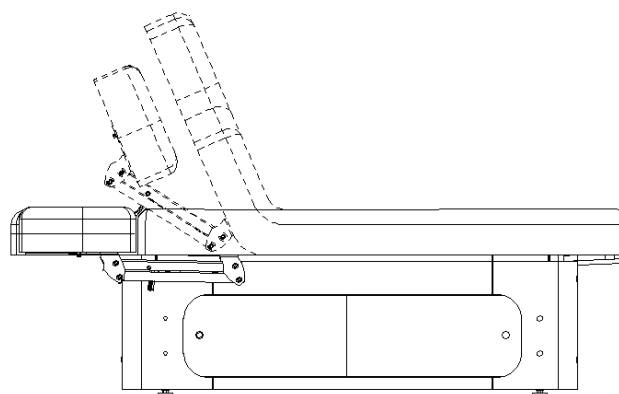

- Use the buttons **3** and **4** on the control knob to adjust the tilt of the backrest.

- Adjusting footrest tilt

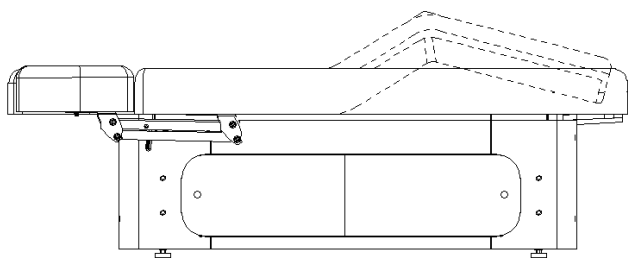


- Use the buttons **5** and **6** on the control knob to adjust the tilt of the footrest.


Manual functions

- Adjusting the armrest

- To lower the armrests, move the lever operating the gas piston and press down on the armrest to the desired position. When you release the lever, the armrest will stay in its current position.

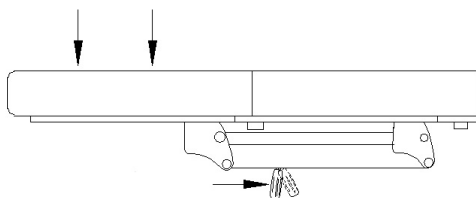

- To raise the armrests, move the lever operating the gas piston while pressing lightly on the armrest, preventing it from rising too fast.

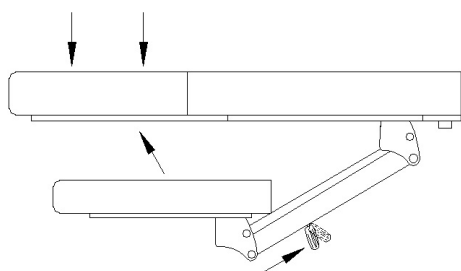

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the device, unplug it from the mains.
- Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use liquids to clean it.
- For maintenance or repairs of any part of the product, please contact your distributor or specialised technician.

RECYCLING

If you need to dispose of the product or any of its parts or accessories, please check and respect the laws and regulations applicable to waste management and environmental protection.

Desde DDUUEETT EUROPE SL le agradecemos su confianza por comprar productos Sonia. Esperamos que este manual de instrucciones le sea de ayuda para sacar el máximo provecho de este producto.

En caso de duda respecto de su utilización y/o funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor.

ANTES DE NADA

- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Tenga en cuenta las advertencias que constan en este manual.
- Conserve siempre este manual de instrucciones y si transfiere el aparato, entregue el manual con él ya que constituye una parte esencial del producto.
- Algunos componentes del producto pueden diferir de la imagen que aparece en catálogos, web, folletos comerciales, etc.
- Con la finalidad de efectuar mejoras del producto, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y/o componentes de este sin previo aviso.

USO CORRECTO DEL APARATO

- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales del sector estético en centros de belleza y no debe ser usado para otros fines.
- Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía.
- No realice ninguna modificación en el aparato sin la autorización de DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL no se hará responsable de ningún daño material o personal debido al mal uso del producto.

PRECAUCIONES

- Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso, compruebe si hay daños en el aparato y en el cable de red.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar su limpieza o cualquier tipo de mantenimiento.
- No use el producto al aire libre ni en ningún lugar donde pueda verse afectado por la humedad o las inclemencias meteorológicas.
- Si el cable de alimentación eléctrica presenta cualquier defecto, desconecte el aparato inmediatamente e informe a su distribuidor o técnico especializado.
- Coloque el cable de alimentación debidamente de manera que no se pueda tropezar con él y conéctelo a un enchufe con toma a tierra.
- Diariamente, después de finalizar la jornada, desconecte el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Si detecta cualquier anomalía en el funcionamiento del producto, consulte con su distribuidor o técnico especializado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El aparato y los accesorios deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Conecte el aparato exclusivamente a una toma de corriente debidamente instalada. La tensión de red local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.
- La toma de corriente debe estar accesible por si se tiene que desenchufar rápidamente el aparato en un momento dado.
- Tire siempre de la clavija y no del cable de red.
- No manipule nunca ningún componente eléctrico ni abra o repare ningún componente del aparato.
- Únicamente su distribuidor o técnico especializado deben reparar el aparato.
- No ponga en marcha el aparato si este o el cable de red presentan daños visibles.
- Nunca toque el aparato o el cable de red con las manos mojadas.
- Nunca exponga sus manos o alguna parte de su cuerpo en algún orificio o vacío de la camilla mientras está en funcionamiento.


CONTENIDO DE LA CAJA

- Camilla eléctrica para spa x 1 unidad
- Manual de instrucciones x 1 unidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Dimensiones	208x87x72-91 cm
Peso neto	147 kg
Carga máxima	200 kg
Motores	4
Tapizado	PU
Grosor de la espuma	18 cm
Tensión	220-240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Incluye	- Mando de control - Calefacción - 3 posiciones memorizadas y personalizables

CROQUIS Y DIMENSIONES

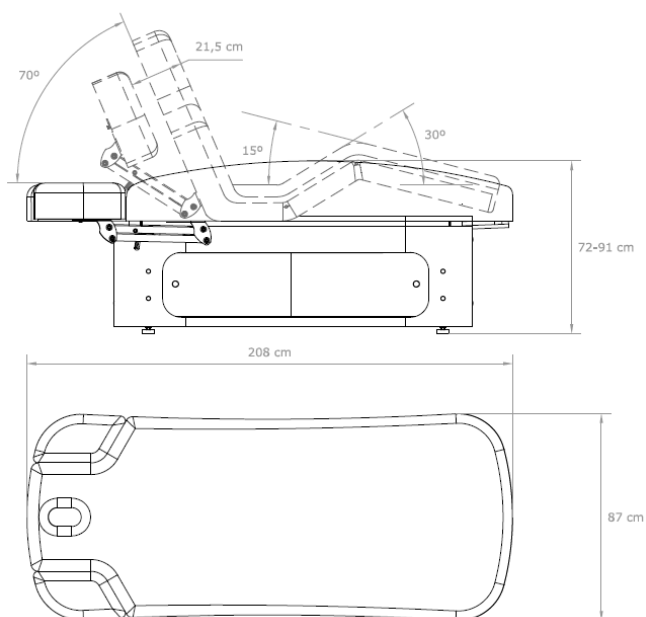


FUNCIONAMIENTO

- Conecte la camilla a una toma de corriente eléctrica mediante el cable de alimentación.
- Para activar el funcionamiento, encontrará en la parte posterior debajo del respaldo, el interruptor ON / OFF. Púlselo situándolo en la posición "I" (ON).
- En este mismo panel se encuentra el fusible y 3 tomas de corriente eléctrica para la conexión de accesorios o herramientas de trabajo.

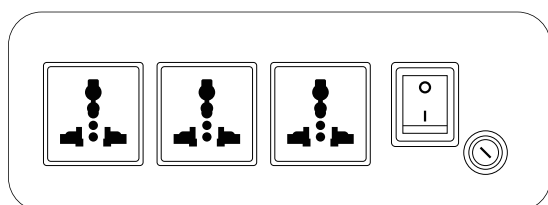


• Mando de control

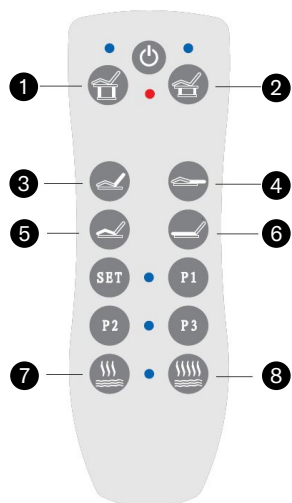

- Pulse el botón para activar el funcionamiento del mando de control. El indicador rojo se iluminará y se podrán usar todas sus funciones.


- Pulse nuevamente el botón y el indicador rojo se apagará al mismo tiempo que la camilla se colocará en posición plana y más baja posible.
- Pulse los botones P1, P2, P3 para colocar la camilla en una de las 3 posiciones memorizadas de fábrica.
- Pulse el botón **7** y la calefacción se pondrá en marcha a intensidad normal. El indicador se iluminará en color verde. Pulse nuevamente el botón **7** y la calefacción se parará. El indicador verde dejará de iluminarse.
- Pulse el botón **8** y la calefacción se pondrá en marcha a intensidad elevada. El indicador se iluminará en color rojo. Pulse nuevamente el botón **8** y la calefacción se parará. El indicador rojo dejará de iluminarse.
- Programe cualquiera de las 3 posiciones que vienen programadas de fábrica a una nueva posición:
 - Una vez tenga la camilla situada en la posición deseada, pulse el botón SET hasta que el indicador azul se ilumine.
 - Mientras el indicador azul esté iluminado, pulse uno de los tres botones (P1, P2, P3) donde desee memorizar la nueva posición.
- La nueva posición se habrá memorizado en el botón seleccionado.

• Ajuste de la altura

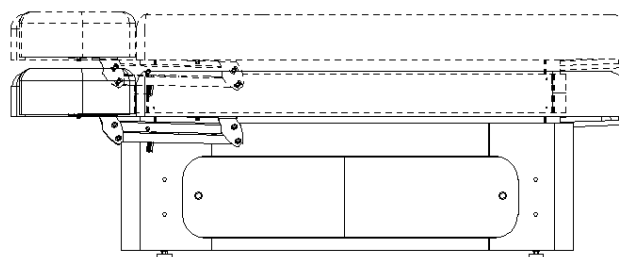


- Utilice los pulsadores **1** y **2** del mando de control para ajustar la altura de la camilla.

• Ajuste de la inclinación del respaldo

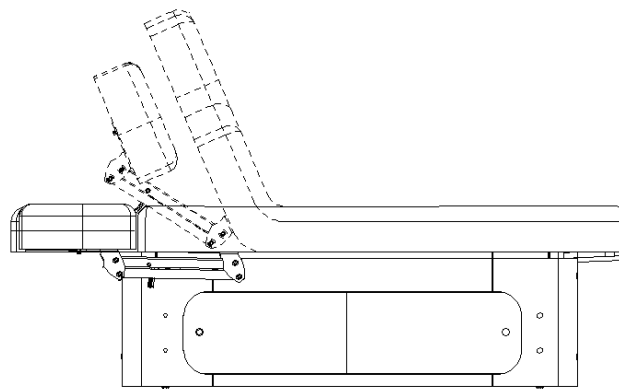

- Utilice los pulsadores **3** - **4** del mando de control para ajustar la inclinación del respaldo.

- Ajuste de la inclinación del reposapiés

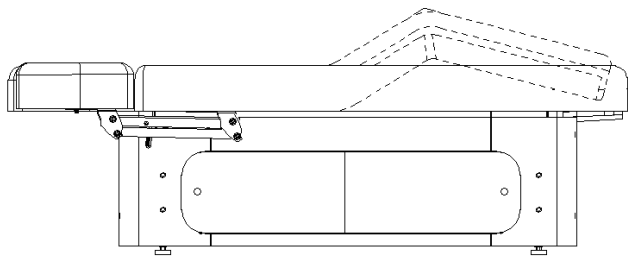


- Utilice los pulsadores ⑤ – ⑥ del mando de control para ajustar la inclinación del reposapiés.


Funciones manuales

- Ajuste de los reposabrazos

- Para bajar los reposabrazos, mueva la palanca que acciona el pistón de gas y presione hacia abajo el reposabrazos hasta la posición deseada. Cuando suelte la palanca el reposabrazos quedará en la posición que se encuentre en ese momento.

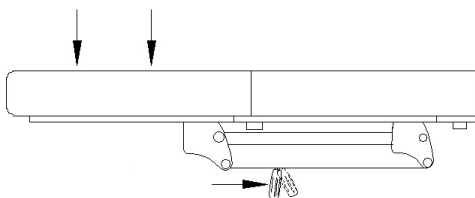

- Para subir los reposabrazos, mueva la palanca que acciona el pistón de gas mientras presiona ligeramente sobre el reposabrazos, evitando así que suba demasiado rápido.

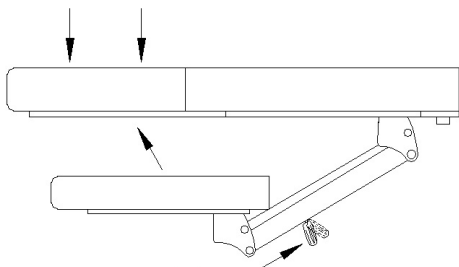

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la red.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. No utilice líquidos para limpiarlo.
- Para mantenimientos o reparación de alguna parte del producto, debe contactar con su distribuidor o técnico especializado.

RECICLAJE

Si necesita deshacerse del producto o de alguna de sus partes o accesorios, consulte y respete las leyes y normativa aplicable a la gestión de residuos y protección del medio ambiente.

De la part de DDUUEETT EUROPE SL, nous vous remercions de votre confiance dans l'achat des produits Sonia. Nous espérons que ce manuel d'instructions vous aidera à tirer le meilleur parti de ce produit.

En cas de doute sur son utilisation et / ou son fonctionnement, contactez votre distributeur.

AVANT TOUT

- Lisez attentivement tout le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Observez les avertissements de ce manuel.
- Conservez toujours ce mode d'emploi et, si vous transférez l'appareil, remettez-le avec lui, car il constitue un élément essentiel du produit.
- Certains composants du produit peuvent différer de l'image apparaissant dans les catalogues, les sites Web, les brochures commerciales, etc.
- Afin d'apporter des améliorations au produit, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et / ou les composants de celui-ci sans préavis.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

- Ce produit a été conçu pour être utilisé par des professionnels de la beauté dans des centres de beauté et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Veuillez noter que toute mauvaise utilisation de l'appareil entraîne la perte de la garantie.
- N'effectuez aucune modification sur l'appareil sans l'autorisation de DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL ne sera responsable d'aucun dommage matériel ou personnel dû à une mauvaise utilisation du produit.

PRÉCAUTIONS

- Avant la première utilisation de l'appareil et après chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de commencer le nettoyage ou tout type d'entretien.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans un endroit où il pourrait être affecté par l'humidité ou les intempéries.
- Si le câble d'alimentation est défectueux, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.
- Placez le cordon d'alimentation correctement afin qu'il ne puisse pas s'emmêler et branchez-le dans une prise connectée à la terre.
- Tous les jours, après la fin de la journée, débranchez l'appareil et le cordon d'alimentation du secteur.
- Si vous détectez une anomalie dans le fonctionnement du produit, consultez votre distributeur ou un technicien spécialisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'appareil et les accessoires doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement installée. La tension du réseau local doit correspondre aux données techniques de l'appareil.
- La prise de courant doit être accessible au cas où vous devriez débrancher l'appareil rapidement et à tout moment.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Ne manipulez aucun composant électrique, n'ouvrez ou réparez aucun composant de l'appareil.
- Seul votre distributeur ou un technicien spécialisé doit réparer l'appareil.
- Ne démarrez pas l'appareil si celui-ci ou le câble réseau sont endommagés.
- Ne touchez jamais l'appareil ou le câble réseau avec des mains mouillées.
- N'exposez jamais vos mains ou une partie de votre corps à un trou ou à un creux du divan pendant son fonctionnement.


CONTENU DE LA BOÎTE

- Table de spa électrique x 1 unité
- Manuel d'instruction x 1 unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	208x87x72-91 cm
Poids net	147 kg
Charge maximale	200 kg
Moteurs	4
Revêtement	PU
Épaisseur de la mousse	18 cm
Tension	220-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Inclus	- Télécommande à main - Chauffage - 3 positions mémorisées et personnalisables

CROQUIS ET DIMENSIONS

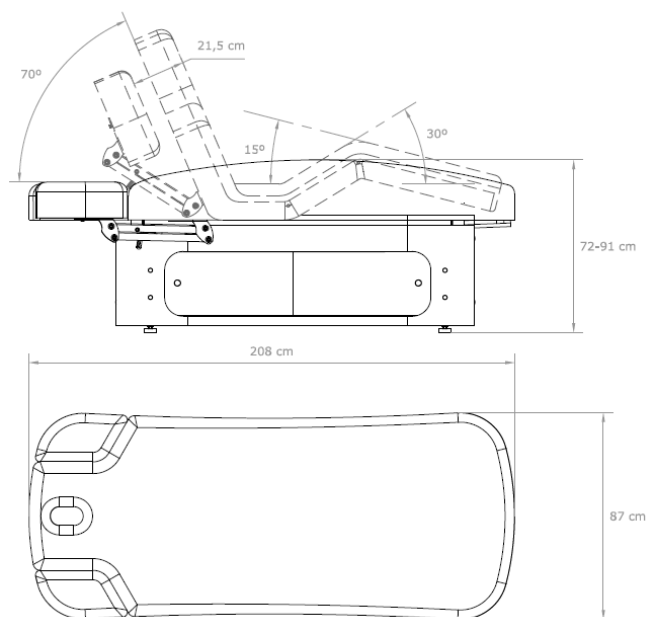


FUNCTIONNEMENT

- Connectez le divan à une prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation.
- Pour activer le fonctionnement, vous trouverez l'interrupteur ON/OFF à l'arrière du dossier. Appuyez dessus jusqu'à obtenir la position « I » (ON).
- Ce même panneau contient le fusible et 3 prises électriques pour le raccordement d'accessoires ou d'outils de travail.



• Télécommande

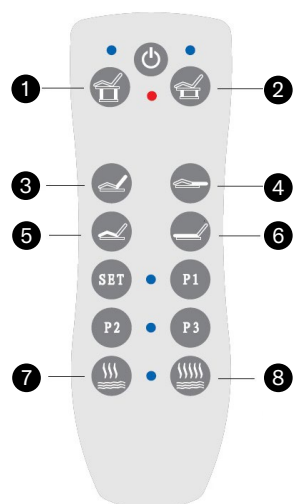


- Appuyer sur la touche pour activer le

fonctionnement du bouton de commande. Le voyant rouge s'allumera et toutes ses fonctions pourront être utilisées.


- Appuyez à nouveau sur le bouton et le voyant rouge s'éteindra en même temps que la civière sera placée à plat et aussi bas que possible.
- Appuyez sur les touches P1, P2, P3 pour placer le divan dans l'une des 3 positions mémorisées par le constructeur.
- Appuyez sur la touche **7** et le chauffage démarrera avec une intensité normale. L'indicateur deviendra vert. Appuyez à nouveau sur la touche **7** pour arrêter le chauffage. L'indicateur vert s'éteindra.
- Appuyez sur le bouton **8** et le chauffage démarrera avec une intensité élevée. L'indicateur deviendra rouge. Appuyez à nouveau sur la touche **8** pour arrêter le chauffage. L'indicateur rouge s'éteindra.
- Programmez l'une des 3 positions paramétrées par le constructeur pour une nouvelle position :
 - Une fois que le divan est dans la position désirée, appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que l'indicateur bleu s'allume.
 - Lorsque l'indicateur bleu est allumé, appuyez sur l'une des cinq touches (P1, P2, P3, P4, P5), sur laquelle vous souhaitez mémoriser la nouvelle position.
 - La nouvelle position sera mémorisée sur la touche sélectionnée.

• Réglage de la hauteur

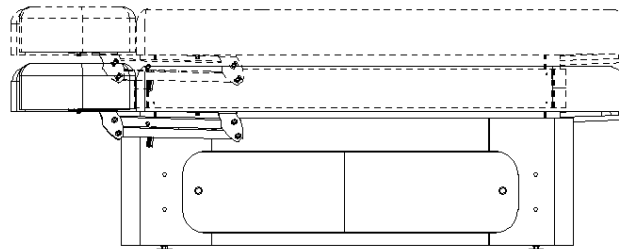


- Utilisez les boutons **1** et **2** de la télécommande pour régler la hauteur et l'inclinaison de la civière

• Réglage de l'inclinaison du dossier

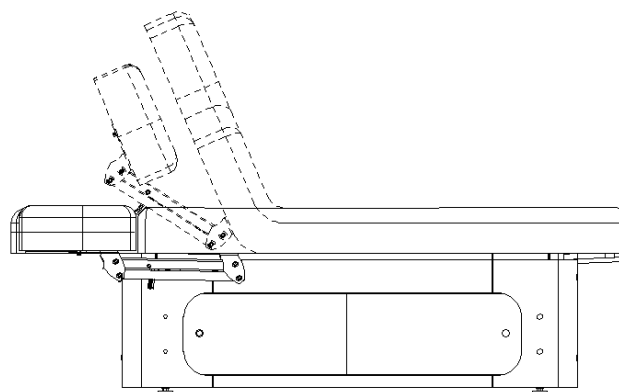

- Utilisez les boutons **3** et **4** de la télécommande pour régler l'inclinaison du dossier.

- Réglage de l'inclinaison du repose-pieds

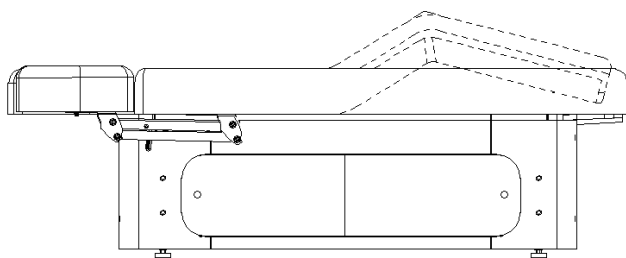


- Utilisez les boutons ⑤ et ⑥ de la télécommande pour régler l'inclinaison du repose-pied.


Fonctions manuelles

- Réglage des accoudoirs

- Pour abaisser les accoudoirs, actionnez le levier actionnant le piston à gaz et appuyez sur l'accoudoir jusqu'à la position souhaitée. Lorsque vous relâchez le levier, l'accoudoir reste dans la position dans laquelle il se trouve.

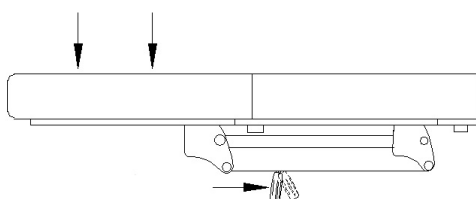

- Pour relever les accoudoirs, actionnez le levier qui actionne le piston à gaz tout en appuyant légèrement sur l'accoudoir, l'empêchant ainsi de monter trop vite.

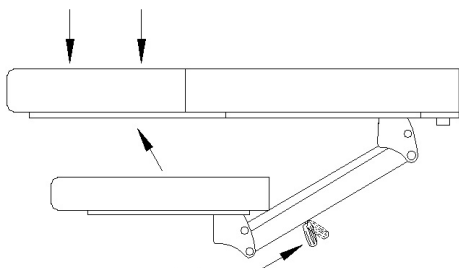

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquides pour le nettoyer.
- Pour tout entretien ou réparation du produit, contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.

RECYCLAGE

Si vous avez besoin d'éliminer le produit ou l'une de ses pièces ou accessoires, consultez et respectez les lois et règlements applicables à la gestion des déchets et à la protection de l'environnement.

DDUUEETT EUROPE SL vi ringrazia per la fiducia riposta nell'acquisto dei prodotti Sonia. Ci auguriamo che questo manuale di istruzioni vi aiuti a trarre il massimo beneficio da questo prodotto.

Se avete dubbi sul suo utilizzo o sul suo funzionamento, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.

INTRODUZIONE

- Siete pregati di leggere attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Tenete conto delle avvertenze presenti in questo manuale.
- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.

CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione di DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL non sarà responsabile di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

CONTROINDICAZIONI

- Questo prodotto non deve essere usato su:
 - Persone portatrici di pacemaker o con problemi di natura cardiaca.
 - Donne in stato di gravidanza.
 - Persone con pelle sensibile, lesioni, infiammazioni o qualsiasi problema o patologia di natura dermatologica.
- In caso di persone sottoposte a trattamento medico o a percorso diagnostico è necessario utilizzare il prodotto sotto autorizzazione medica.

MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.

- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se doveste rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegare il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o alcuna parte del corpo in nessuna fessura o spazio del lettino mentre è in funzione.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Lettino da massaggio x 1 unità
- Manuale di istruzioni x 1 unità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	208x87x72-91 cm
Peso netto	147 kg
Carico massimo	200 kg
Motori	4
Tappezzeria	PU
Spessore della schiuma	18 cm
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Include	- Telecomando - Riscaldamento - 3 posizioni memorizzate e personalizzabili

SCHEMA E DIMENSIONI

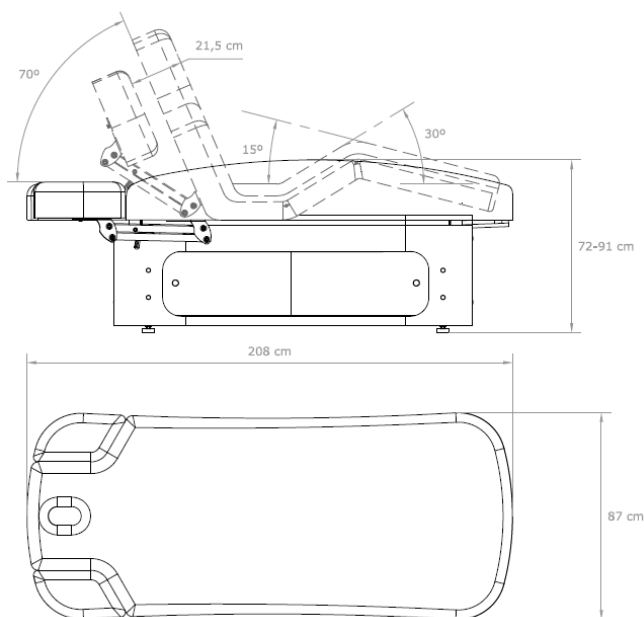


FUNZIONAMENTO

- Collegare il lettino ad una presa di corrente tramite il cavo di alimentazione.
- Per attivarne il funzionamento, troverai l'interruttore ON/OFF nella parte posteriore sotto lo schienale. Premerlo per portarlo sulla posizione "I" (ON).
- In questo stesso pannello è presente il fusibile e 3 prese elettriche per il collegamento di accessori o strumenti di lavoro.




• Telecomando

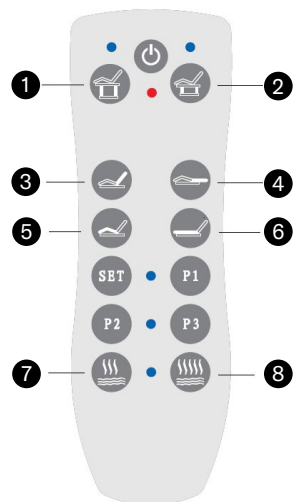

- Premere il pulsante per attivare il funzionamento del telecomando. Il tasto rosso si illuminerà e si potranno usare tutte le sue funzioni.


- Premere di nuovo il pulsante il pulsante rosso si spegnerà nello stesso momento in cui il lettino si disporrà in posizione piana e il più basso possibile.
- Premere i pulsanti dal P1 al P3 per posizionare il lettino in una delle tre posizioni memorizzate dalla fabbrica.
- Premere il pulsante **7** ed il riscaldamento inizierà ad intensità normale. La spia si illuminerà di verde. Premere di nuovo il pulsante **7** ed il riscaldamento si fermerà. La spia verde si spegnerà.
- Premere il pulsante **8** ed il riscaldamento inizierà ad intensità elevata. La spia si illuminerà di rosso. Premere nuovamente il pulsante **8** e il riscaldamento si fermerà. La spia rossa si spegnerà.
- Programmare una delle 3 posizioni preimpostate dalla fabbrica in una nuova posizione:
 - Una volta posizionato il lettino nella posizione desiderata, premere il pulsante SET fino a che la spia diventerà azzurra.
 - Mentre la spia azzurra è accesa, premere uno dei tre pulsanti (P1, P2, P3) a seconda di dove si vuole memorizzare la nuova posizione.
 - La nuova posizione verrà memorizzata nel pulsante selezionato.

• Regolazione dell'altezza

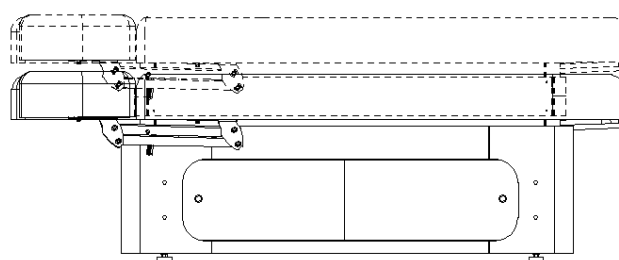


- Utilizzare i pulsanti **1** e **2** del telecomando per modificare l'altezza del lettino

• Regolazione dell'inclinazione dello schienale

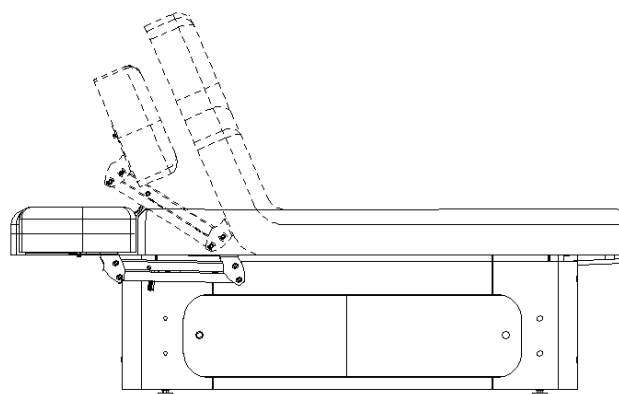

- Utilizzare i pulsanti **3** e **4** del telecomando per modificare l'inclinazione dello schienale.

- Regolazione dell'inclinazione del poggiatesta

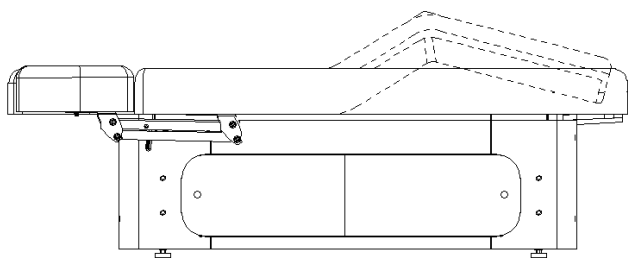


- Utilizzare i pulsanti ⑤ – ⑥ del telecomando per modificare l'inclinazione del poggiatesta.


Funzioni manuali

- Regolazione dei braccioli

- Per abbassare i braccioli, muovere la leva che aziona il pistone a gas e premere verso il basso il bracciolo fino alla posizione desiderata. Lasciando la leva, il bracciolo resterà nella posizione prestabilita.

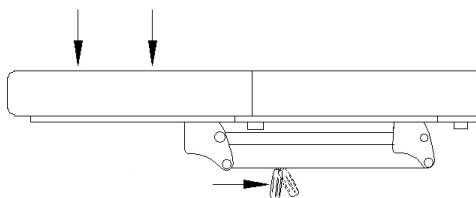

- Per sollevare i braccioli, muovere la leva che aziona il pistone a gas facendo una leggera pressione sul bracciolo, evitando così uno scatto improvviso.

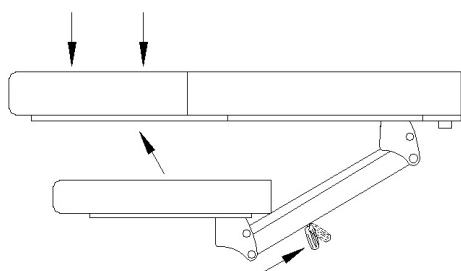

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegatelo dalla rete elettrica.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate liquidi per pulirlo.
- Per la manutenzione o riparazione di qualsiasi parte del prodotto, contattare il distributore o tecnico specializzato.

SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.

Wir von DDUUEETT EUROPE S. L. danken Ihnen für Ihr Vertrauen beim Kauf von Sonia-Produkten. Wir hoffen, dass diese Bedienungsanleitung Ihnen hilft, dieses Produkt optimal zu nutzen.

Sollten Sie noch Fragen zur Verwendung und/oder Funktion haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VOR ALLEM

- Lesen Sie sich bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets auf und händigen Sie bei der Weitergabe des Geräts die Bedienungsanleitung aus, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.
- Einige Komponenten des Produktes können von den Abbildungen in Katalogen, im Web, in Unternehmensbroschüren usw. abweichen.
- Um Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, behält sich der Hersteller das Recht vor, dessen Merkmale und/oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KORREKTE NUTZUNG DES GERÄTS

- Dieses Produkt wurde für die Verwendung durch Fachleute auf dem kosmetischen Sektor in kosmetischen Kliniken entwickelt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass jeder unsachgemäße Gebrauch des Geräts zum Verlust der Garantie führt.
- Nehmen Sie ohne Genehmigung von DDUUEETT EUROPE S. L. keine Änderungen am Gerät vor.
- DDUUEETT EUROPE S. LI haftet nicht für materielle oder persönliche Schäden, die auf den Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen es durch Feuchtigkeit oder schlechtes Wetter beeinträchtigt werden kann.
- Wenn das Stromversorgungskabel defekt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.
- Positionieren Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
- Trennen Sie das Gerät täglich am Ende des Arbeitstages vom Netz und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Wenn Sie eine Störung beim Betrieb des Produkts feststellen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen

spezialisierten Techniker.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät und das Zubehör müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die lokale Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Die Steckdose muss zugänglich sein, wenn Sie das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt schnell vom Netz trennen müssen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Netzkabel.
- Berühren Sie niemals elektrische Komponenten oder öffnen oder reparieren Sie keine Komponenten des Gerätes.
- Das Gerät darf nur von Ihrem Händler oder einem spezialisierten Techniker repariert werden.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Händen.
- Bringen Sie niemals Ihre Hände oder sonstige Körperteile während des Betriebs in eine Öffnung oder einen Hohlraum der Transportbahre.


INHALT DER VRPACKUNG

- Elektrische Spa-Liege x 1 St.
- Bedienungsanleitung x 1 St.

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	208x87x72-91 cm
Nettogewicht	147 kg
Max. Belastbarkeit	200 kg
Motoren	4
Polsterung	PU
Schaumdicke	18 cm
Spannung	220-240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Enthält	- Handfernbedienung - Heizung - 3 gespeicherte und personalisierbare Positionen

SKIZZE UND ABMESSUNGEN

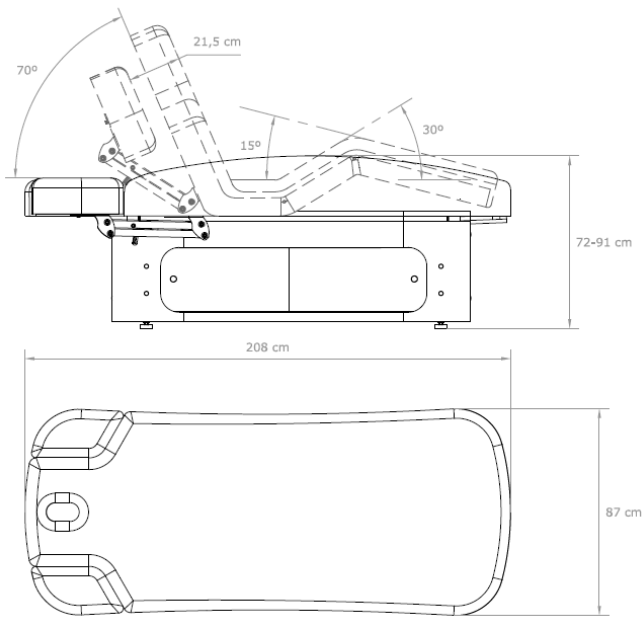


BETRIEB

- Schließen Sie die Transportbahre mit dem Netzkabel an eine Steckdose an.
- Auf der Rückseite finden Sie unter der Rückenlehne den EIN- / AUS-Schalter, um den Betrieb zu starten. Drücken Sie den Schalter, um den Sessel in die Position "I" (EIN) zu bringen.
- In diesem Bedienfeld befinden sich auch die Sicherung und 3 Steckdosen für den Anschluss von Zubehör oder Arbeitsgeräten.



• Steuerknöpfe

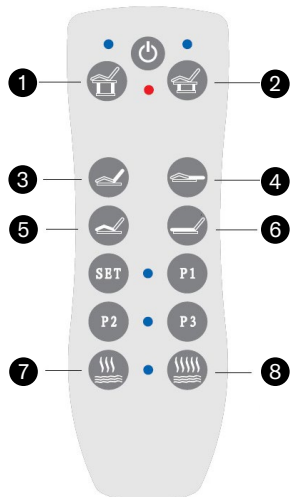


- Drücken Sie die Taste um die Bedienung des Steuerknopfs zu aktivieren. Die rote Anzeige leuchtet

auf und alle Funktionen können verwendet werden.


- Drücken Sie erneut die Taste und die rote Anzeige erlischt zur gleichen Zeit wie die Liege flach und so tief wie möglich eingestellt wird.
- Drücken Sie die Tasten P1, P2, P3 um die Bahre in eine der 3 werkseitig gespeicherten Positionen zu bringen.
- Wenn Sie die Taste **7** drücken, startet die Heizung mit normaler Intensität. Die Anzeige leuchtet grün. Durch erneutes Drücken der Taste **7** wird die Heizung gestoppt. Die grüne Anzeige hört auf zu leuchten.
- Wenn Sie die Taste **8** drücken, startet die Heizung mit größerer Intensität. Die Anzeige leuchtet rot. Durch erneutes Drücken der Taste **8** wird die Heizung gestoppt. Die rote Anzeige hört auf zu leuchten.
- Sie können jede der 3 werkseitig programmierten Positionen in einer neuen Stellung programmieren:
 - Sobald sich die Bahre in der gewünschten Position befindet, drücken Sie die SET-Taste, bis die blaue Anzeige aufleuchtet.
 - Drücken Sie, während die blaue Anzeige leuchtet, eine der drei Tasten (P1, P2, P3), auf der Sie die neue Position speichern möchten.
 - Die neue Position wird in der ausgewählten Schaltfläche gespeichert

• Höheneinstellung

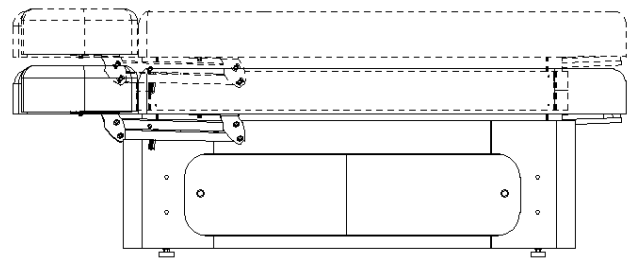


- Verwenden Sie die Druckknöpfe 1 .. und 2 .. der Fernbedienung, um die Höhe die Neigung der Liege einzustellen.

• Neigungsverstellung der Rückenlehne

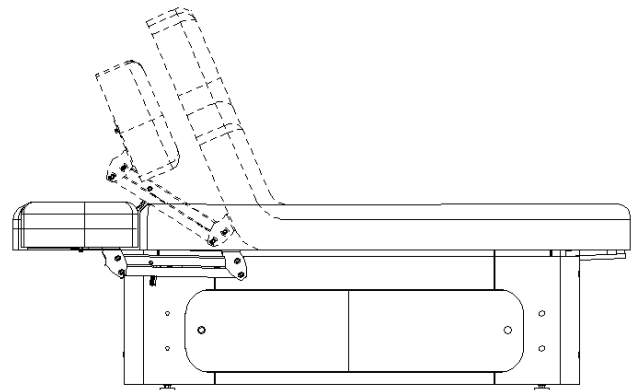

- Verwenden Sie die Druckknöpfe **3** und **4** der Fernbedienung, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen.

- Neigungsverstellung der Fußstütze

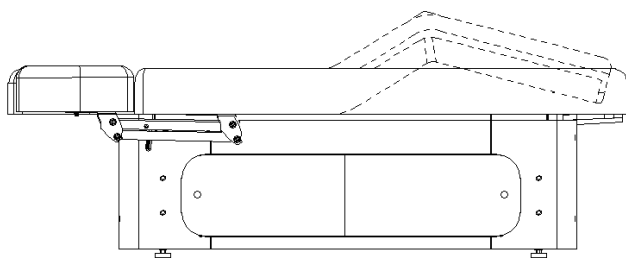


- Verwenden Sie die Druckknöpfe ⑤ und ⑥ der Fernbedienung, um die Neigung der Fußstütze einzustellen.


Manuelle Funktionen

- Einstellung der Armlehnen

- Um die Armlehnen abzusenken, bewegen Sie den Hebel, der den Gaskolben betätigt, und drücken Sie die Armlehne solange nach unten, bis die gewünschte Position erreicht wurde. Wenn Sie den Hebel loslassen, bleiben die Armlehnen in der Position, in der Sie sich gerade befinden.

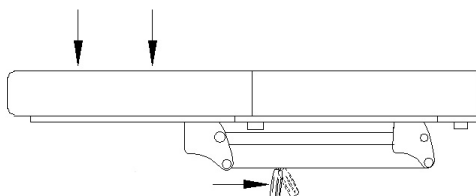

- Bewegen Sie zum Anheben der Armlehnen den Hebel, der den Gaskolben betätigt, während Sie leicht auf die Armlehnen drücken, damit diese nicht zu schnell angehoben wird.

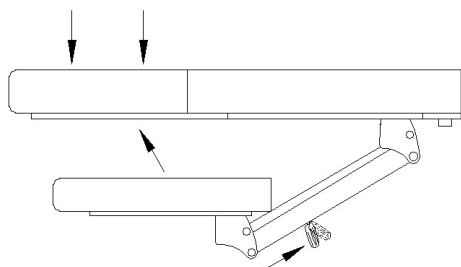

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor Reinigung des Gerätes ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten.
- Wenden Sie sich zur Wartung oder Reparatur eines Teils des Produkts an Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

RECYCLING

Wenn Sie das Produkt, Teile oder Zubehör entsorgen müssen, halten Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung und den Umweltschutz geltenden Gesetze und Vorschriften.

