Bexen medical

SANISUS MEDICAL

• REFERENCIA: EF001 – EF003 – EF005 – EF010 - EF020 – EF035 – EF060

JERINGA ENFit

CE 0197

Descripción

Jeringa ENFit concéntrica para nutrición enteral, libre de látex, sin DEHP, estéril y de un sólo uso.

Conformidad

Clasificación: Clase I estéril.
Certificación ISO: Jiangsu Caina Medical Co., Ltd. tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 13485.
Oiarso S. Coop. (Bexen medical®) tiene implementado y mantiene un sistema de calidad conforme a las exigencias de las Normas ISO 13485, ISO 9001 e ISO 14001.
Marcado CE según la Directiva Europea 93/42/CEE.

Utilización

Dispositivo diseñado para la nutrición enteral por bolus que permite la conexión con los equipos para la nutrición. Compatible con la conexión ENFit. (ISO 80369-3)

Características

Cuerpo	Escala de volumen graduada y serigrafiada
Émbolo	con junta de estanqueidad
Lubricante	De grado médico para favorecer que el deslizamiento del émbolo sea homogéneo y permita una infusión continua.

Materiales utilizados

Cuerpo	Polipropileno transparente
Émbolo	Polipropileno lila
Junta estanqueidad	Goma
Tapón	Polipropileno lila
Lubricante	Aceite de silicona (Polidimetilsiloxano HC-SS26)

Presentación

Unidad de empleo: Envase sellado pelable.
Presentación: Ver tabla

Esterilización

Producto estéril.
Proceso: Óxido Etileno (EO).
Periodo de caducidad: 5 años desde fecha de esterilización.

Instrucciones de uso

- Abrir el envase que contiene la jeringa, observando siempre las medidas oportunas de asepsia (guantes, etc.)
- Unir la jeringa a la conexión ENFit del equipo de administración de nutrición enteral.

Después de la utilización de todos y cada uno de los elementos, depositarlos en un recipiente dedicado a materiales con riesgo de contaminación.

Ref.	Volumen (ml)	Volumen muerto (ml)	Presentación (ud/caja)	Código de barra Envase unitario (EAN 13)	Código de barra caja (DUN14)
EF001	1	0,016	100	6933298560014	16933298560011
EF003	3	0,19	100	6933298560038	16933298560035
EF005	5	0,19	100	6933298560052	16933298560059
EF010	10	0,19	100	6933298560106	16933298560103
EF020	20	0,19	300	6933298560205	16933298560608
EF035	35	0,19	300	6933298560359	16933298560356
EF060	60	0,19	180	6933298560601	16933298560202

Riesgos de la reutilización

No Reutilizar. La reutilización de los productos sanitarios puede provocar:

- Problemas de esterilidad por contaminación biológica, así como desatar reacciones pirogénicas.
- Problemas de contaminación cruzada por el empleo de distintos fluidos y/o preparaciones.
- Cambios físico-químicos que puedan comprometer las propiedades y prestaciones de los productos.

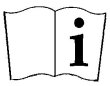
Verificación de las conexiones

Antes de la colocación del dispositivo en su posición final, y tras todas las conexiones o desconexiones complementarias, verificar el buen enlace y fijación de los elementos conectables.

FABRICANTE	EC REP
Jiangsu Caina Medical CO., Ltd No. 23, Huanxi Rd, Zhutang 214415 Jiangsu, China	Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe) Eiffestrasse 9. 20537 Hamburg Germany.

IMPORTADOR
Oiarso, S. Coop. (Bexen medical®) B° Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze 20120 Hernani (Guipúzcoa) Tel : 943 33 50 20 www.bexenmedical.com

Símbolos utilizados en etiquetado

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	Número de catálogo		Código de lote
	Fecha de fabricación		Fecha de caducidad
	Esterilizado usando Óxido de Etileno		No contiene Látex
	Un solo uso		No usar si el envase está dañado
	Instrucciones de uso		Precaución
	Marcado CE de Conformidad		Mantener fuera de la luz del sol
	No contiene DEHP		

Bexen medical

JERINGA ENFit

CE 0197

